

Particularité de l'appareil - ZOLL AED Plus

Facile à posséder, Facile à utiliser, Facile à entretenir

Dans seulement 50 % des cas, le défibrillateur doit être utilisé !
 Dans 100% des cas il faut effectuer une RCP !

Le RCP-Feedback aide à maintenir une fréquence adéquate ainsi qu'une bonne profondeur de massage
 Les nouvelles directives AHA 2015 soulignent l'énorme importance d'une bonne RCP avant une possible défibrillation.

*RCP = Massage Cardiaque / Respiration = Réanimation cardio-pulmonaire


Features



Design convivial
 „Fisher Price-Look“ diminue les appréhensions lors d'utilisateurs novices



Modèle unique d'électrodes de défibrillation
 Avec analyse RCP, pré-connectées
 Durée de vie : 5 ans

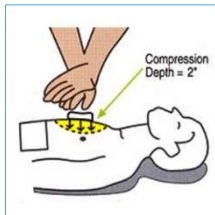

Unique AED avec capteur RCP
 Informations optiques et acoustiques sur la qualité du massage cardiaque




Système de guidage très simple
 avec LED's, textes, symboles et informations vocales



Pictogrammes simples et intuitifs
 La compréhension est aisée, même pour les malentendants et les personnes de langue étrangère

| Year | Model | Price | Weight | Volume | Capacity | Defibrillation | ECG | Feedback | IP |
|------|---------------|-------|--------|--------|----------|----------------|-----|----------|-------|
| 1 | ZOLL AED Plus | 1000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Yes | Yes | Yes | IP 55 |
| 2 | Model B | 1200 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | No | No | No | IP 55 |
| 3 | Model C | 1100 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Yes | Yes | No | IP 55 |
| 4 | Model D | 1300 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | No | No | No | IP 55 |
| 5 | Model E | 1400 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | No | No | No | IP 55 |

Défibrillateur le plus économique à l'entretien
 Informations plus détaillées sur la Fiche des coûts d'entretien

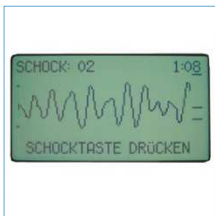

Ecran
 Ecran LCD très lisible, pour texte et ECG (électrocardiogramme)



Sécurité & Protection
 Protection contre les jets d'eau et la poussière:
 IP 55



Source d'énergie
 Batteries standards pour appareils photographique :
 Lithium 123A
 Durée de vie : 5 ans



Compatibilité
 Compatible avec tous les appareils de la REGA ainsi que de nombreux service d'urgence

Particularité de l'appareil - ZOLL AED Plus

Facile à posséder, Facile à utiliser, Facile à entretenir



Aide passive pour les voies respiratoires

Le couvercle positionné sous les épaules permet une libération optimale des voies respiratoires




Défibrillation pour enfants

Adaptation automatique de l'énergie délivrée grâce aux électrodes pédiatriques




Indicateur de status

Indicateur Rouge/Vert indiquant le status et signal sonore pour lors de défectuosité

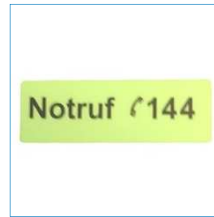


Numéro d'urgence intégré

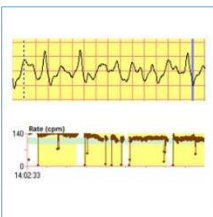

Mémoire intégrée

50 Min. d'enregistrement de l'ECG, énergie, temps écoulé, efficacité de la RCP, évènements, etc.

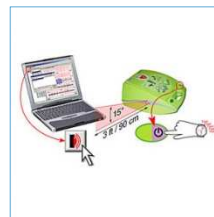


Transmission des données sur PC

via connexion infrarouge intégrée




Analyse du cas

Software gratuit pour l'analyse ultérieure d'un évènement, information sur la RCP incluse

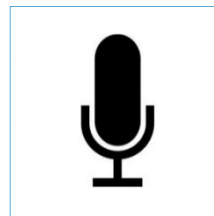

Options supplémentaires

Enregistrement vocal (Voice Recorder) ou 180 Min. de mémoire ECG

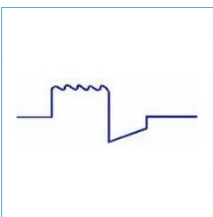

Distribution efficace d'un choc

Courbe biphasique, rectangulaire "Basse Energie" très efficace (voir études cliniques)